


IVISKIN

IVISKIN G4 IPL Hårfjerner





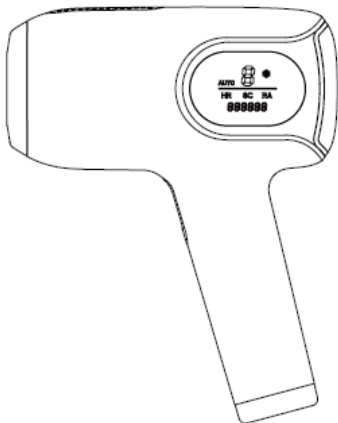

Brukermanual

Innholdsfortegnelse

1.Beskrivelse av knapper.....	S.4
2.Før du bruker enheten.....	S.6
3.Sikkerhetstiltak.....	S.6
4.Produktet passer ikke for.....	S.7
5.Hvor kan enheten brukes?.....	S.8
6.Unngå å bruke IPL på:.....	S.9
7.Test før bruk.....	S.9
8.Hvordan komme i gang.....	S.10
9.Instruksjoner.....	S.10
10.Innstillinger for lyseffekt.....	S.11
11.Vedlikehold etter bruk.....	S.12
12.Feilsøking.....	S.12

1. Beskrivelse av knapper:



LCD-skjerm	Funksjon
HR	Hårfjerning
SC	Hudforyngelse
RA	Kviser
	IceShield
AUTO	Autolysmodus
Nivå 1 - 9	Lysintensitet
Seks sifre	Gjenværende antall lysblink
	Funksjonsbryterknapp, tilgjengelig i "HR". Veksle mellom "SC", "RA" og "Iceshield".
	Trykk og hold berøringsknappen i 2 sekunder for å slå maskinen av og på
	Trykk en gang på knappen for å bytte intensitet. Opptil 9 nivåer kan stilles inn.

2. Før du bruker enheten:

Sjekk hudtypen din som du finner på hudfargekontrollbildet under. Ikke bruk denne enheten hvis du har mørk hud. Det kan føre til uheldige reaksjoner i huden, som pigmentering og depigmentering, alvorlig rødhet og hevelse eller svie.



3. Sikkerhetstiltak:

- Ikke påfør krem eller pleieprodukter før bruk, da kremer vil tette hårisekkene slik at lyset ikke når helt ned.
- Må ikke brukes i badekaret eller dusjen.
- Enheten oppbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys.
- Hvis huden på området som skal behandles ikke er tørr eller ren, vil det påvirke brukseffekten, som kan føre til at produktet ikke blinker eller blinker med uhell.
- Vi anbefaler at alle brukere av våre IPL hårfjernere er 18 år eller eldre. Er du under 18 år må du ha samtykke fra dine foreldre.

- Vennligst sjekk jevnlig etter skitt på blits-vinduet for å unngå brannskader og svikt under bruk.
- Ikke blokker utluftingen når du bruker den, da det kan føre til røyk og brann.
- Vennligst sett styrkenivået i henhold til din hudtype. Bruk det første nivået når du bruker den for første gang. Det er normalt at huden blir litt varm og rød etter bruk.

4. Produktet passer ikke for:

- Gravide kvinner, ammende kvinner, kroppsarr, diabetes, skjør hud og lyssensitiv hud.
- Alvorlig hjertesykdom, moderat til alvorlig hypertensjon, ondartede svulster, follikulitt, smittsom hudsykdom, brent hud og antikoagulasjonsforstyrrelser.
- Ikke bruk hvis du har unormal kollagenmetabolisme, inkludert en historie med arr og dårlig sårhelbredelse.
- Pasienter med vaskulære sykdommer, slik som åreknuter på bestrålingsstedet.
- Pasienter med herpes simplex, hudlesjoner og hematom må ikke bruke enheten.

- Personer med immunsykdommer (inkludert HIV, porfyri etc.) må ikke bruke enheten.
- Enhver pasient med blødningsforstyrrelse og de som bruker isotretinoin, fruktsyre (AHA), salisyre (BHA) eller azaleasyre må ikke bruke enheten.
- Vennligst bruk dette produktet med forsiktighet hvis du har brukt kjemisk hårfjerning de siste 30 dagene. Dette gjelder også de som har brukt hudblekningsprodukter eller produkter med vitamin A-ingredienser den siste tiden.
- Ikke bruk enheten hvis du har tatt aspirin, immundempende legemidler og andre legemidler.

5. Hvor kan enheten brukes?

IVISKIN IPL hårfjerner kan brukes over hele kroppen så lenge det er under nesetippen! Dette er en anbefaling da vi ønsker at alle skal passe på å ikke få IPL direkte i øynene under behandling.

Når det gjelder nedentil kan den brukes hos kvinner på brasiliansk måte, men unngå å behandle anus, slimhinner og indre kjønnslepper. Hos menn anbefaler vi å ikke behandle penis og pung. Området rundt kan behandles.

6. Unngå å bruke IPL på:

1. Øyeeplet, øyelokk og rundt øynene
2. Slimhinner og anus
3. Områder med akne
4. Tatoveringer
5. Øyebryn
6. Øre
7. Brystvorte, areola
8. Inne i navelen
9. Store årer

(Merk: Denne listen er ikke uttømmende. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke dette produktet anbefaler vi at du oppsøker lege).

7. Test før bruk

Det er anbefalt å utføre en test før bruk.

Testmetode:

Det anbefales å sjekke for bivirkninger eller reaksjoner ved å utføre en hudtest 24 timer før første behandling. Test på et lite hudområde på innsiden av overarmen en gang med styrke 1 og en gang med styrke 5. Hvis du oppdager rødhet, brannså, stikkende smerter eller andre symptomer i løpet av de neste 24 timene, kontakt lege før du bruker den igjen.

8. Hvordan komme i gang og bruke IPL hårfjerner:

Vennligst fjern håret fra huden først med barbering. Ved voksing/epilering eller napping vil ikke IPL fungere, så det er viktig å kun barbere hårene så langt ned til huden som mulig. Huden skal være fullstendig tørr og fri for oljer og kremer. Avgi kun en lysimpuls per sted. Det er ikke nødvendig med flere blink samme sted.

Still inn riktig intensitet:

Skalaen på nivåene går fra 1 til 9, der 1 er lav og 9 er høy. Når du prøver dette for første gang, må du starte på nivå 1. Etter hvert som du blir mer vant til prosessen, kan du sakte øke styrken uke for uke, men bare hvis det ikke forårsaker smerte under behandlingen. Pass på at du dekker alle områdene du ønsker å behandle ved og plassere behandlings-vinduet tett inntil det forrige området du behandlet.

9. Instruksjoner

1. Koble til strømadapteren, slå på strømforsyningen og bruk de eksklusive vernebrillene som følger med produktet. Enhetens display lyser, og displaytilstanden er "AV"
2. Trykk og hold inne påknappen i 2 sekunder. Enheten vil starte og bekrefte gjeldende arbeidsstatus på displayet.
3. Trykk på "Funksjonsbryterknapp". Når skjermen viser HR vil den gå inn i hårfjerningsmodus.
4. Maskinen har 1-9 nivåer. Trykk kort på bryteren for intensitetsnivå for å justere lysbølgeintensiteten. Ved førstegangsbruk, vennligst start på nivå 1.

5. Etter bruk, trykk på “på-knappen” i 2 sekunder for å slå av. Hvis du ikke utfører en handling med enheten vil den slå seg av automatisk etter fem minutter.

10. Innstillinger for lyseffekt:

- Manuell modus (egnet for hårfjerning på små områder). Når enheten er slått på, starter den i manuell modus som standard. Trykk én gang på blitsknappen for å avgi lys én gang.

- Automodus (for hårfjerning av store områder). Etter at enheten er slått på, trykk og hold inne blitsknappen. Enheten bytter til automodus, og “AUTO” på skjermen vil blinke. Når du holder blitsvinduet nær huden vil enheten automatisk blinke.

- IceShield-funksjon: Trykk på “Funksjonsbryterknappen”. Et snøfnuggikon vises på skjermen, noe som betyr at kjølefunksjonen er aktivert.
- Hårfjerning, hudfornyelse og aknebehandling: Trykk på “Funksjonsbryterknappen”. Displayet vil bytte mellom HR, SC og RA.

Anbefalt behandling:

IPL brukes én gang i uken i 12 uker. Etter allerede 4 uker vil du merke forskjell.

Etter 12 uker vil du enten være fornøyd med resultatet og gå over i etterbehandlingsfasen, eller fortsette - dette varierer fra person til person. Fortsetter du behandlingen gjør du dette videre en gang i uken til du oppnår de ønskede resultatene.

Etterbehandlingsfasen: Du opprettholder dine resultater ved å ta i bruk IPL en gang annenhver måned etter endt behandling.

11. Vedlikehold etter bruk

- Vi anbefaler å vente 24 timer med soling, både før og etter hver behandling. Dersom du er eller blir solbrent under behandlingsperioden anbefaler vi å vente en uke til neste gang du utfører behandling med IPL da huden bruker ca en uke på å helbrede seg fra solbrenthet. Husk å alltid beskytte huden med solkrem!
- Unngå solarium i behandlingsperioden
- Hvis du trenger plastisk kirurgi etter hårfjerning (kun i området du har fjernet hår) må du forhøre deg med din lege.
- Føler du deg syk eller uvel, ta kontakt med lege.

Når du skal kaste produktet, ikke kast det i restavfall. Returner det til en miljøstasjon. Dette er viktig for miljøet og oss.

12. Feilsøking:

Denne delen inneholder de vanligste problemene du kan støte på ved bruk av denne enheten. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av denne informasjonen, vennligst ta kontakt med kundeservice.

<u>Beskrivelse av problem:</u>	<u>Mulige årsaker:</u>	<u>Løsninger:</u>
Laderen eller enheten blir varm under bruk.	Dette er normalt.	Du trenger ikke å gjøre noe.

Jeg plasserer hårfjerningsmaskinen på huden og tallet blinket men kjølingsviften begynte å kjøre.	Beskyttelse mot overoppheting har blitt aktivert.	Når beskyttelsen mot overoppheting begynner fortsetter viften å kjøre. Ikke slå av strømmen. Vennligst vent på at enheten kjøler seg ned i 15 minutter før du fortsetter bruken.
Enheten blinker ikke når blitsknappen trykkes inn.	Enheten må tilbakestilles.	Tilbakestill enheten ved å skru strømmen av og på.
Jeg kan ikke øke eller senke intensitetsnivået.	Enheten må tilbakestilles.	Tilbakestill enheten ved å skru strømmen av og på.
Det lukter vondt når jeg bruker enheten.	Tilbehør og filter er for møkkete. Vennligst vask tilbehøret nøye. Håret fra behandlingsstedet er ikke fjernet godt nok. Disse hårene kan brenne og produsere en vond lukt.	Vennligst fjern håret på hudoverflaten før du bruker enheten.
Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/uutholdelig smerte når jeg bruker enheten.	Lysintensiteten du har valgt er for høy.	Vennligst forsikre deg om at riktig lysintensitet er valgt. Senk intensiteten om nødvendig.
Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/uutholdelig smerte når jeg bruker enheten.	Du har ikke fjernet alt håret fra behandlingsstedet.	Vennligst fjern håret på behandlingsstedet før du bruker enheten.
	Det ultrafiolette filteret ved utgangen er skadet.	Når UV-filteret er skadet må du ikke fortsette å bruke enheten. Kontakt kundeservice.

<p>Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/uutholdelig smerte når jeg bruker enheten.</p>	<p>Du har brukt enheten på feil sted.</p>	<p>Ikke bruk denne enheten i følgende områder: brystvorten, areola, kjønnsleppene, vagina, anus, samt innsiden av neseborene og ørene. Mannlige brukere bør ikke bruke produktet i ansiktet eller pungen.</p>
	<p>Enheten passer ikke til hudtypen din.</p>	<p>Hvis hudtypen er VI, brun-svart eller veldig mørk vennligst ikke bruk denne enheten.</p>
<p>Hudens reaksjon varte lengre enn vanlig etter behandlingen.</p>	<p>Lysintensiteten du har valgt er for høy.</p>	<p>Vennligst velg en lavere lysintensitet neste gang.</p>
	<p>Lysintensiteten du har valgt er for lav.</p>	<p>Vennligst velg en høyere lysintensitet neste gang.</p>
	<p>Enheten har ingen effekt på hårfargen din.</p>	<p>Du må fjerne alt håret. Det anbefales at du følger den anbefalte behandlingsprosedyren.</p>
	<p>Kroppen din sin respons på IPL-behandling kan være treg.</p>	<p>Fortsett å bruk enheten i minst seks måneder, fordi håret vil vokse igjen i denne perioden, men mengden vil minske.</p>

Dersom du lurer på noe mer sjekk ut bloggen vår på iviskin.no/blogg eller FAQ med ofte stilte spørsmål som du finner på nettsiden vår. Kundeservice står også klare til å besvare alle dine spørsmål på chat, telefon eller mail mellom kl. 09-16 mandag til fredag.

