


IVISKIN

IVISKIN G3 IPL Hårfjerner

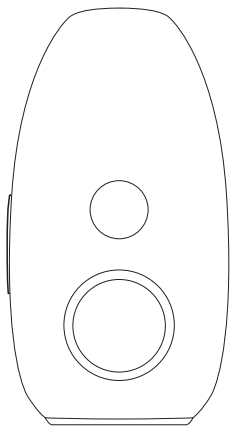

Brukermanual


Innholdsfortegnelse

1.Beskrivelse av knapper og display.....	S.4
2.Før du bruker enheten.....	S.4
3.Sikkerhetstiltak.....	S.5
4.Produktet passer ikke for.....	S.6
5.Hvor kan enheten brukes?.....	S.7
6.Unngå å bruke IPL på:.....	S.7
7.Test før bruk.....	S.8
8.Hvordan komme i gang.....	S.8
9.Instruksjoner.....	S.9
10.Vedlikehold etter bruk.....	S.9
11.Feilsøking.....	S.10

1. Beskrivelse av knapper og display:

IceShield og automodus-knapp 

På/av-knapp 

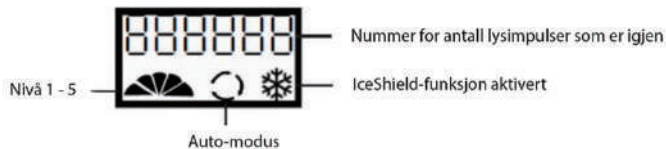

2. Før du bruker enheten:

Sjekk hudtypen din som du finner på hudfargekontrollbilde under. Ikke bruk denne enheten hvis du har mørk hud. Det kan føre til uheldige reaksjoner i huden, som pigmentering og depigmentering, alvorlig rødhet og hevelse eller svie.



3. Sikkerhetstiltak:

- Ikke påfør krem eller pleieprodukter før bruk da kremer vil tette hårsekkene slik at lyset ikke når helt ned.
- Må ikke brukes i badekaret eller dusjen.
- Enheten oppbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys.
- Hvis huden på området som skal behandles ikke er tørr eller ren, vil det påvirke brukseffekten, som kan føre til at produktet ikke blinker eller blinker med uhell.
- Vi anbefaler at alle brukere av våre IPL hårfjernere er 18 år eller eldre. Er du under 18 år må du ha samtykke fra dine foreldre.
- Vennligst sjekk jevnlig etter skitt på blitsvinduet for å unngå brannskader og svikt under bruk.
- Ikke blokker utluftingen når du bruker den, da det kan føre til røyk og brann.
- Vennligst sett intensitetsnivået i henhold til din hudtype. Bruk det første nivået når du bruker den for første gang.
- Det er normalt at huden blir litt varm og rød etter bruk.

4. Produktet passer ikke for:

- Gravide kvinner, ammende kvinner, kroppsarr, diabetes, skjør hud og lyssensitiv hud.
- Alvorlig hjertesykdom, moderat til alvorlig hypertensjon, ondartede svulster, follikulitt, smittsom hudsykdom, brent hud og antikoagulasjonsforstyrrelser.
- Ikke bruk hvis du har unormal kollagenmetabolisme, inkludert historie med arr og dårlig sårhelbredelse.
- Pasienter med vaskulære sykdommer, slik som åreknuter på bestrålingsstedet.
- Pasienter med herpes simplex, hudlesjoner og hematom må ikke bruke enheten.
- Personer med immunsykdommer (inkludert HIV, porfyri etc.) må ikke bruke enheten.
- Enhver pasient med blødningsforstyrrelse og de som bruker isotretinoin, fruktsyre (AHA), salisyre (BHA) eller azaleasyre må ikke bruke enheten.
- Vennligst bruk dette produktet med forsiktighet hvis du har brukt kjemisk hårfjerning de siste 30 dagene. Dette gjelder også de som har brukt hudblekningsprodukter eller produkter med vitamin A- ingredienser den siste tiden.

- Ikke bruk enheten hvis du har tatt aspirin, immundempende legemidler og andre legemidler.

5. Hvor kan enheten brukes?

Iviskin IPL hårfjerner kan brukes over hele kroppen så lenge det er under nesetippen! Dette er en anbefaling da vi ønsker at alle skal passe på å ikke få IPL direkte i øynene under behandling.

Når det gjelder nedentil kan den brukes hos kvinner på brasiliansk måte, men unngå å behandle anus, slimhinner og indre kjønnslepper. Hos menn anbefaler vi å ikke behandle penis og pung. Området rundt kan behandles.

6. Unngå å bruke IPL på:

1. Øyeeplet, øyelokk og rundt øynene
2. Slimhinner og anus
3. Områder med akne
4. Tatoveringer
5. Øyebryn
6. Øre
7. Brystvorte, areola
8. Inne i navelen
9. Store årer

(Merk: Denne listen er ikke uttømmende. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke dette produktet anbefaler vi at du oppsøker lege).

7. Det er anbefalt å utføre en test før bruk.

Testmetode:

Det anbefales å sjekke for bivirkninger eller reaksjoner ved å utføre en hudtest 24 timer før første behandling. Test på et lite hudområde på innsiden av overarmen en gang med styrke 1 og en gang med styrke 5. Hvis du oppdager rødhet, brannså, stikkende smerter eller andre symptomer i løpet av de neste 24 timene, kontakt lege før du bruker den igjen.

8. Hvordan komme i gang og bruke IPL hårfjerner:

Vennligst fjern håret fra huden først med barbering. Ved voksing/epilering eller napping vil ikke IPL fungere, så det er viktig å kun barbere hårene så langt ned til huden som mulig. Huden skal være fullstendig tørr og fri for oljer og kremer. Avgi kun en lysimpuls per sted. Det er ikke nødvendig med flere blink samme sted.

1. Koble til strømadapteren. Skjermen viser "OFF".
2. Hold inne på-knappen, frem til skjermen slår seg på. Innholdet på skjermen endrer seg. Trykk raskt på på-knappen for øke nivået. 1-2-3-4-5-4-3-2-1.
3. Etter oppstart av enheten er ikke ice-shield funksjonen aktivert. (frysepunktikonet på skjermen vises derfor ikke). Trykk kort på kjøleknappen for å slå kjøling av/på. Da vises frysepunktikonet på skjermen når det er på.
4. Etter at du har slått på maskinen, trykk på lyspulsknappen (så lenge hodet er nær huden) for å gå inn i manuell blitsmodus. Hold inne IceShield og automodus-knappen i 2 sekunder for å aktivere eller

deaktivere automatisk blitsmodus. Ved automatisk blitsmodus så vil lysimpulsene komme automatisk (så lenge enheten er nær huden din).

5. Etter bruk holder du inne på-knappen for å skru den av.

Still inn riktig intensitet:

Skalaen på nivåene går fra 1 til 5, der 1 er lav og 5 er høy. Når du prøver dette for første gang, må du starte på nivå 1. Etter hvert som du blir mer vant til prosessen, kan du sakte øke styrken uke for uke, men bare hvis det ikke forårsaker smerte under behandlingen. Pass på at du dekker alle områder du ønsker å behandle ved og plassere behandlings-vinduet tett inntil det forrige området du behandlet.

9. Anbefalt behandling:

IPL brukes én gang i uken i 12 uker. Etter allerede 4 uker vil du merke forskjell. Etter 12 uker vil du enten være fornøyd med resultatet og gå over i etterbehandlingsfasen, eller fortsette – dette varierer fra person til person. Fortsetter du behandlingen gjør du dette videre en gang i uken til du oppnår de ønskede resultatene.

Etterbehandlingsfasen: Du opprettholder dine resultater ved å ta i bruk IPL en gang annenhver måned etter endt behandling.

10. Vedlikehold etter bruk

- Vi anbefaler å vente 24 timer med soling, både før og etter hver behandling. Dersom du er eller blir solbrent under behandlingsperioden anbefaler vi å vente en uke til neste gang du utfører behandling med IPL da huden bruker ca en uke på å helbrede seg fra solbrenthet. Husk å alltid beskytte huden med solkrem!

- Unngå solarium i behandlingsperioden
- Hvis du trenger plastisk kirurgi etter hårfjerning (kun i området du har fjernet hår) må du forhøre deg med din lege.
- Føler du deg syk eller uvel, ta kontakt med lege.

Når du skal kaste produktet, ikke kast det i restavfall. Returner det til en miljøstasjon. Dette er viktig for miljøet og oss.

11. Feilsøking:

Denne delen inneholder de vanligste problemene du kan støte på ved bruk av denne enheten. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av denne informasjonen, vennligst ta kontakt med kundeservice.

<u>Beskrivelse av problem:</u>	<u>Mulige årsaker:</u>	<u>Løsninger:</u>
Laderen eller enheten blir varm under bruk.	Dette er normalt.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Jeg plasserer hårfjerningsmaskinen på huden og tallet blinket men kjølingsviften begynte å kjøre.	Beskyttelse mot overoppheting har blitt aktivert.	Når beskyttelsen mot overoppheting begynner fortsetter viften å kjøre. Ikke slå av strømmen. Vennligst vent på at enheten kjøler seg ned i 15 minutter før du fortsetter bruken.

Enheden blinker ikke når blitsknappen trykkes inn.	Enheden må tilbakestilles.	Tilbakestill enheten ved å skru strømmen av og på.
Jeg kan ikke øke eller senke intensitetsnivået.	Enheden må tilbakestilles.	Tilbakestill enheten ved å skru strømmen av og på.
Det lukter vondt når jeg bruker enheten.	Tilbehør og filter er for møkkete. Vennligst vask tilbehøret nøye. Håret fra behandlingsstedet er ikke fjernet godt nok. Disse hårene kan brenne og produsere en vond lukt.	Vennligst fjern håret på hudoverflaten før du bruker enheten.
Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/uutholdelig smerte når jeg bruker enheten.	Lysintensiteten du har valgt er for høy.	Vennligst forsikre deg om at riktig lysintensitet er valgt. Senk intensiteten om nødvendig.
	Du har ikke fjernet alt håret fra behandlingsstedet.	Vennligst fjern håret på behandlingsstedet før du bruker enheten.
	Det ultrafiolette filteret ved utgangen er skadet.	Når UV-filteret er skadet må du ikke fortsette å bruke enheten. Kontakt kundeservice.
	Du har brukt enheten på feil sted.	Ikke bruk denne enheten i følgende områder: brystvorten, areola, kjønnsleppene, vagina, anus, samt innsiden av neseborene og ørene.

		Mannlige brukere bør ikke bruke produktet i ansiktet eller pungen.
	Enheten passer ikke til hudtypen din.	Hvis hudtypen er VI, brunsvart eller veldig mørk vennligst ikke bruk denne enheten.
Hudens reaksjon varte lengre enn vanlig etter behandlingen.	Lysintensiteten du har valgt er for høy.	Vennligst velg en lavere lysintensitet neste gang.
	Lysintensiteten du har valgt er for lav.	Vennligst velg en høyere lysintensitet neste gang.
	Enheten har ingen effekt på hårfargen din.	Du må fjerne alt håret. Det anbefales at du følger den anbefalte behandlingsprosedyren.

Dersom du lurer på noe mer sjekk ut bloggen vår på iviskin.no/blogg eller FAQ med ofte stilte spørsmål som du finner på nettsiden vår. Kundeservice står også klare til å besvare alle dine spørsmål på chat, telefon eller mail mellom kl. 09-16 mandag til fredag.