


IVISKIN

IVISKIN G1 IPL Hårfjerner

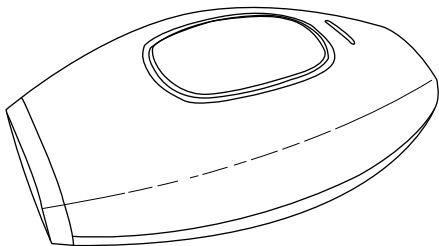



Brukermanual

Les brukermanualen før du bruker enheten.

Innholdsfortegnelse

1.Beskrivelse av knapper.....	S.4
2.Før du bruker enheten.....	S.5
3.Sikkerhetstiltak.....	S.5
4.Produktet passer ikke for.....	S.7
5.Hvor kan enheten brukes?.....	S.8
6.Unngå å bruke IPL på.....	S.8
7.Test før bruk.....	S.9
8.Hvordan komme i gang.....	S.9
9.Instruksjoner.....	S.11
10.Soleksponering under behandling.....	S.12
11.Feilsøking.....	S.13

1. Beskrivelse av knapper:

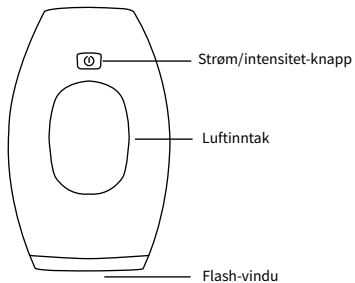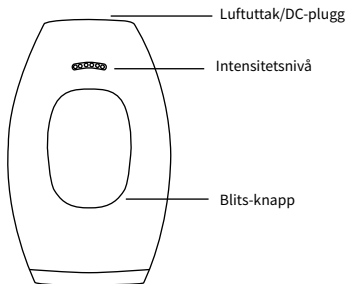

2. Før du bruker enheten:

Sjekk hudtypen din som du finner på hudfargekontrollbildet under. Ikke bruk denne enheten hvis du har mørk hud. Det kan føre til uheldige reaksjoner i huden, som pigmentering og depigmentering, alvorlig rødhet og hevelse eller svie.



3. Sikkerhetstiltak:

Disse sikkerhetstiltakene er generelle anbefalinger for trygg bruk av IPL-teknologi hjemme. De er ikke unike for vår modell, men er gode praksiser som bidrar til å sikre en trygg og effektiv behandling.

- Ikke påfør krem eller pleieprodukter før bruk, da kremer vil tette hårsekkene slik at lyset ikke når helt ned eller skaper en reaksjon.
- Må ikke brukes i badekaret, dusjen eller i kontakt med vann.
- Enheten oppbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys.
- Hvis huden på området som skal behandles ikke er tørr eller ren, vil det påvirke brukseffekten, som kan føre til at produktet ikke blinker eller blinker med uhell.
- Vi anbefaler at alle brukere av våre IPL hårfjernere er 18 år eller eldre. Er du under 18 år må du ha samtykke fra dine foreldre.
- Er du under 18 år og har sensitiv hud, kontakt lege for råd om du kan bruke IPL.
- Vennligst sjekk jevnlig etter skitt på blits-vinduet for å unngå brannskader og svikt under bruk.

- Ikke blokker utluftingen når du bruker den, da det kan føre til røyk og brann.
- Vennligst sett styrkenivået i henhold til din hudtype. Sjekk punkt nr. 8 hvordan komme igang.
- Ved tegn på hudirritasjon eller rødhet etter behandling, avvent med påføring av produkter på huden din til symptomene avtar. Om irritasjonen vedvarer etter bruk av et produkt, rens umiddelbart med vann. Ved vedvarende symptomer, avslutt bruk av produktet og rådfør deg med helsepersonell.
- Dette produktet skal kun brukes i samsvar med dets designerte hensikt. Følg de generelle sikkerhetsanvisningene som er angitt i brukermanualen. Ukorrekt bruk kan resultere i ulykker som elektriske støt, skader i form av brennmerker, eller andre relaterte skader.
- Å benytte intens pulserende lys for å fjerne hår kan hos noen føre til motsatt effekt, nemlig økt hårvekst. Kvinner fra Middelhavsland, Midtøsten og Sør-Asia som får behandling i ansiktsregionen er spesielt utsatt ifølge aktuell forskning. Fenomenet kalles "paradoksal hypertrikose" eller "paradoksal hårvekst", og er sjelden. Det er viktig å nevne at personer med mørkere hud kan oppleve forskjellige resultater og potensielle bivirkninger enn de med lysere hud, uavhengig av enhetstypen.
- Hudirritasjon fra aktiviteter som barbering eller andre ting bør heles før bruk av enheten.
- Ikke bruk selvbruningskrem eller noe form for selftan under behandling.
- En hudnær barbering anbefales mest. Målet er at lysenergien skal nå hårsekken så raskt som mulig, så barbering på forhånd er avgjørende for å oppnå de beste resultatene. Du kan utføre voksing, plukking eller epilering, men da må du vente 24 timer før du utfører behandling med IPL.

- Dette verktøyet er ikke laget for de med begrenset fysisk, sensorisk, eller kognitiv kapasitet, med mindre de får veiledning fra en person med nødvendig erfaring.
- Barns interaksjon med enheten bør overvåkes for å forhindre potensielle risikoer som eksponering for lys, elektrisk fare, eller potensielle faremomenter knyttet til enhetens komponenter.
- For optimalt resultat, hold deg til den foreslåtte behandlingsfrekvensen. Overdreven bruk tidlig i prosessen kan forverre risikoen for bivirkninger på huden.
- Hvis du trenger plastisk kirurgi etter hårfjerning (kun i området du har fjernet hår) må du forhøre deg med din lege.
- Føler du deg syk eller uvel etter bruk, ta kontakt med lege.
- Vi anbefaler å bruke beskyttelsesbrillene som følger med under behandling.

4. Produktet passer ikke for:

- Gravide kvinner, ammende kvinner, kroppsarr, diabetes, skjør hud og lyssensitiv hud.
- Alvorlig hjertesykdom, moderat til alvorlig hypertensjon, ondartede svulster, follikulitt, smittsom hudsykdom, brent hud og antikoagulasjonsforstyrrelser.
- Ikke bruk hvis du har unormal kollagenmetabolisme, inkludert en historie med arr og dårlig sårhelbredelse.
- Pasienter med vaskulære sykdommer, slik som åreknuter på bestrålingsstedet.
- Pasienter med herpes simplex utbrudd, hudlesjoner og hematom må ikke bruke enheten.

- Personer med immunsykdommer (inkludert HIV, porfyri etc.) må ikke bruke enheten.
- Enhver pasient med blødningsforstyrrelse og de som bruker isotretinoin, fruktsyre (AHA), salisyre (BHA) eller azaleasyre må ikke bruke enheten.
- Vennligst bruk dette produktet med forsiktighet hvis du har brukt kjemisk hårfjerning de siste 30 dagene. Dette gjelder også de som har brukt hudblekningsprodukter eller produkter med vitamin A-ingredienser den siste tiden.
- Ikke bruk enheten hvis du har tatt aspirin, immundempende legemidler og andre legemidler.

5. Hvor kan enheten brukes?

IVISKIN IPL hårfjerner kan brukes over hele kroppen så lenge det er under nesetippen! Dette er en anbefaling da vi ønsker at alle skal passe på å ikke få IPL direkte i øynene under behandling.

Når det gjelder nedentil kan den brukes hos kvinner på brasiliansk måte, men unngå å behandle anus, slimhinner og indre kjønnslepper. Hos menn anbefaler vi å ikke behandle penis og pungen. Området rundt kan behandles.

6. Unngå å bruke IPL på:

1. Øyeeplet, øyelokk og rundt øynene
2. Slimhinner og anus
3. Områder med akne
4. Tatoveringer

5. Øyebryn
6. Øre
7. Brystvorte, areola
8. Inne i navelen
9. Store årer

(Merk: Denne listen er ikke uttømmende. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke dette produktet anbefaler vi at du oppsøker lege).

7. Det er anbefalt å utføre en test før bruk:

Testmetode:

Det anbefales å sjekke for bivirkninger eller reaksjoner ved å utføre en hudtest 24 timer før første behandling. Test på et lite hudområde på innsiden av overarmen en gang med styrke 1 og en gang med styrke 5. Hvis du oppdager rødhet, brannså, stikkende smerter eller andre symptomer i løpet av de neste 24 timene, kontakt lege før du bruker den igjen.

8. Hvordan komme i gang og bruke IPL hårfjerner:

Vennligst fjern håret fra huden først med barbering. Dersom du utfører voksing, plukking eller epilering, må du vente 24 timer før du utfører behandling med IPL. Huden skal være fullstendig tørr og fri for oljer og kremer. Avgi kun en lysimpuls per sted. Det er ikke nødvendig med flere blink samme sted.

1. Koble til strømadapteren. Skjermen viser "OFF".
2. Hold inne på-knappen, frem til skjermen slår seg på. Innholdet på skjermen endrer seg. Trykk raskt på på-knappen for øke nivået. 1-2-3-4-5-4-3-2-1.

3. Etter oppstart av enheten er ikke ice-shield funksjonen aktivert. (frysepunktikonet på skjermen vises derfor ikke). Trykk kort på kjøleknappen for å slå kjøling av/på. Da vises frysepunktikonet på skjermen når det er på.
4. Etter at du har slått på maskinen, trykk på lyspulsknappen (så lenge hodet er nær huden) for å gå inn i manuell blitsmodus. Hold inne IceShield og automodus-knappen i 2 sekunder for å aktivere eller 9 deaktivere automatisk blitsmodus. Ved automatisk blitsmodus så vil lysimpulsene komme automatisk (så lenge enheten er nær huden din).
5. Etter bruk holder du inne på-knappen for å skru den av.

Still inn riktig intensitet:

Skalaen på nivåene går fra 1 til 5, der 1 er lav og 5 er høy. Når du prøver dette for første gang, må du starte på nivå 1. Etter hvert som du blir mer vant til prosessen, kan du sakte øke styrken uke for uke, men bare hvis det ikke forårsaker smerte under behandlingen.

Vi anbefaler at du dekker alle områdene du ønsker å behandle ved og plassere behandlings-vinduet tett inntil det forrige området du behandlet. Dette er for å oppnå best resultat.

Personer med mørk hud bør utvise forsiktighet ved bruk av IPL (Intense Pulsed Light) behandling; det anbefales enten å unngå bruk, eller å velge en lavere styrke for å minske risikoen for bivirkninger som hudirritasjon, rødhet, og hyperpigmentering. Om du observerer forandringer i hudens farge etter en behandling, bør du ta kontakt med legen din.

9. Instruksjoner:

1. Trykk på "strømknappen" i ett sekund. Den vil starte og gå inn i arbeidstilstand (den grønne indikatorlampen lyser, og du kan høre at systemet kjører). Du vil se at den røde indikatorlampen er på etter oppstart.
2. Det rosa lyset på enheten indikerer om det er hud i nærheten eller ikke. Dersom det rosa lyset er konstant er den ikke i nærheten av huden - da vil det heller ikke gå an å trykke på knappen for å få IPL. Er det rosa lyset i nærheten av huden, vil det blinke.
3. Klikk på "strømknappen" for å velge passende intensitetsnivå. Det er fem intensitetsnivåer som er angitt med de blå indikatorlysene. Nivå 1 er minimum intensitet, nivå 5 er maksimal. Enhver justering skjer med et klikk på strømknappen.
4. Når intensitetsnivået er satt, plasser blits-vinduet mot huden slik at hele vinduet blir dekket. Du vil se det røde indikatorlyset blinke. Klikk deretter på blitsknappen. Enheten vil blinke én gang.

Manuellmodus:

Standard oppstart er manuell modus og du må trykke kort på blitsknappen for at den skal levere et lysglimt. Hvis du trenger å bytte til glidemodus, holder du bare nede blitsknappen i 2 sekunder og deretter vil det blå lyset lyse konstant og blinke.

Glidemodus:

For glidemodus trykker du lysvinduet mot huden for å aktivere glidemodussensoren som vil oppdage huden. Hold blitsknappen inne i 2 sekunder - da vil den begynne å blinke med jevne mellomrom. Blitsen stopper

etter at den har forlatt huden. For å gå ut av glidemodus må du holde nede blitsknappen i 2 sekunder, og den vil gå tilbake til manuell modus.

Anbefalt behandling:

IPL brukes én gang i uken i 12 uker. Etter allerede 4 uker vil du merke forskjell.

Etter 12 uker vil du enten være fornøyd med resultatet og gå over i etterbehandlingsfasen, eller fortsette - dette varierer fra person til person. Fortsetter du behandlingen gjør du dette videre en gang i uken til du oppnår de ønskede resultatene.

Etterbehandlingsfasen: Du opprettholder dine resultater ved å ta i bruk IPL en gang annenhver måned etter endt behandling.

10.Soleksponering under behandling:

- Vi anbefaler å vente 48 timer med soling etter behandling.
- Dersom du er eller blir solbrent under behandlingsperioden, må du vente til det er gått over før du bruker IPL hårfjerner. Husk å alltid beskytte huden med solkrem! Bruk SPF 50 + på områdene som er behandlet 48 timer etter bruk og SPF 30 + i minst to uker etter.
- Unngå solarium i behandlingsperioden.
- Etter soling må du vente to uker før du bruker Iviskin sin IPL hårfjerner. Da skal du utføre en test 24 timer før du setter i gang behandlingen. Se punkt 7 "Test før bruk".

Når du skal kaste produktet, ikke kast det i restavfall. Returner det til en miljøstasjon. Dette er viktig for miljøet og oss.

11. Feilsøking:

Denne delen inneholder de vanligste problemene du kan støte på ved bruk av denne enheten. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av denne informasjonen, vennligst ta kontakt med kundeservice.

<u>Beskrivelse av problem:</u>	<u>Mulige årsaker:</u>	<u>Løsninger:</u>
Laderen eller enheten blir varm under bruk.	Dette er normalt.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Jeg plasserer hårfjerningsmaskinen på huden og tallet blinket men kjølingsviften begynte å kjøre.	Beskyttelse mot overoppheting har blitt aktivert.	Når beskyttelsen mot overoppheting begynner fortsetter viften å kjøre. Ikke slå av strømmen. Vennligst vent på at enheten kjøler seg ned i 15 minutter før du fortsetter bruken.
Enheten blinker ikke når blitsknappen trykkes inn.	Enheten må tilbakestilles.	Tilbakestill enheten ved å skru strømmen av og på.
Jeg kan ikke øke eller senke intensitetsnivået.	Enheten må tilbakestilles.	Tilbakestill enheten ved å skru strømmen av og på.
Det lukter vondt når jeg bruker enheten.	Tilbehør og filter er for møkkete. Vennligst vask tilbehøret nøye. Håret fra behandlingsstedet er ikke fjernet godt nok. Disse hårene kan brenne og produsere en vond lukt.	Vennligst fjern håret på hudoverflaten før du bruker enheten.

<p>Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/utholdelig smerte når jeg bruker enheten.</p>	<p>Lysintensiteten du har valgt er for høy.</p>	<p>Vennligst forsikre deg om at riktig lysintensitet er valgt. Senk intensiteten om nødvendig.</p>
<p>Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/utholdelig smerte når jeg bruker enheten.</p>	<p>Du har ikke fjernet alt håret fra behandlingsstedet.</p>	<p>Vennligst fjern håret på behandlingsstedet før du bruker enheten.</p>
	<p>Det ultrafiolette filteret ved utgangen er skadet.</p>	<p>Når UV-filteret er skadet må du ikke fortsette å bruke enheten. Kontakt kundeservice.</p>
<p>Under behandlingen føles huden mer sensitiv enn normalt/utholdelig smerte når jeg bruker enheten.</p>	<p>Du har brukt enheten på feil sted.</p>	<p>Ikke bruk denne enheten i følgende områder: brystvorten, areola, kjønnsleppene, vagina, anus, samt insiden av neseborene og ørene. Mannlige brukere bør ikke bruke produktet i ansiktet eller pungen.</p>
	<p>Enheten passer ikke til hudtypen din.</p>	<p>Hvis hudtypen er VI, brun-svart eller veldig mørk vennligst ikke bruk denne enheten.</p>
<p>Hudens reaksjon varte lengre enn vanlig etter behandlingen.</p>	<p>Lysintensiteten du har valgt er for høy.</p>	<p>Vennligst velg en lavere lysintensitet neste gang.</p>
	<p>Lysintensiteten du har valgt er for lav.</p>	<p>Vennligst velg en høyere lysintensitet neste gang.</p>

Enheden har ingen effekt på hårfargen din.	Du må fjerne alt håret. Det anbefales at du følger den anbefalte behandlingsprosedyren.
Kroppen din sin respons på IPL-behandling kan være treg.	Fortsett å bruk enheten i minst seks måneder, fordi håret vil vokse igjen i denne perioden, men mengden vil minske.

Dersom du lurer på noe mer sjekk ut bloggen vår på iviskin.no/blogg eller FAQ med ofte stilte spørsmål som du finner på nettsiden vår. Kundeservice står også klare til å besvare alle dine spørsmål på chat, telefon eller mail mellom kl. 09-16 mandag til fredag.

Når du skal kaste produktet, ikke kast det i restavfall. Returner det til en miljøstasjon. Dette er viktig for miljøet og oss.

HVORDAN BRUKE IVISKIN IPL HÅRFJERNER

MED 6 ENKLE STEG!

1



1. Les brukermanual nøye før bruk

2



2. Shave behandlingsområde og tørk godt

3



3. Skru på enheten og velg riktig styrke

4



4. Plasser lysvinduet helt inn til huden og start behandlingen!

5



5. La enheten kjøle seg ned før du renser lysvinduet med en klut

6



6. Smør behandlingsområde med en rik bodylotion